


LYKOS[®] & ZILOS-tk[®]

SISTEMAS LÁSER FIJOS Y MÓVILES

Para Hatching asistido y biopsia embrionaria

VISIÓN GENERAL

Hamilton Thorne ofrece sistemas láser fijos y móviles sencillos de usar para la asistencia de TRA complejas como la biopsia o el hatching embrionarios. Nuestros láseres trabajan con objetivos de 40 aumentos, son de Clase I, de alta potencia y permiten trabajar con pulsos de hasta 1 microsegundo.

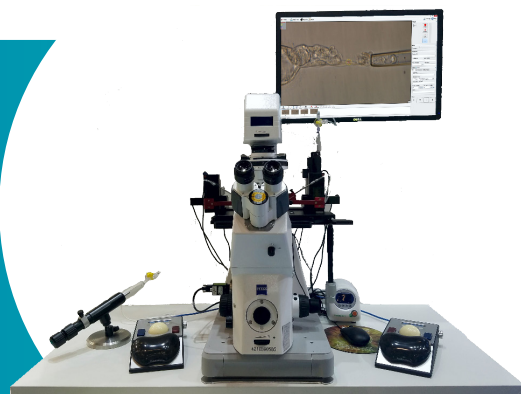

LYKOS DTS LÁSER MÓVIL

El láser LYKOS con DTS (Dynamic Targeting System) ofrece una gran precisión controlada por ordenador, permitiendo el uso de funciones de corte avanzadas como el disparo único, en línea/curva, multipunto, ¡y mucho más! Utilice el LYKOS con DTS para separar células de forma rápida y sencilla durante los procedimientos de RA.




LYKOS / ZILOS-tk LÁSER FIJO

El láser LYKOS dispone de una diana LED (RED-i) visible a través de los oculares del microscopio. Su modo multipulso permite disparar en serie de forma rápida. El modelo "ZILOS-tk Legacy" se presenta como una alternativa de láser económico, ya que no contiene RED-i ni permite trabajar con funciones de disparo multipulso.




Características

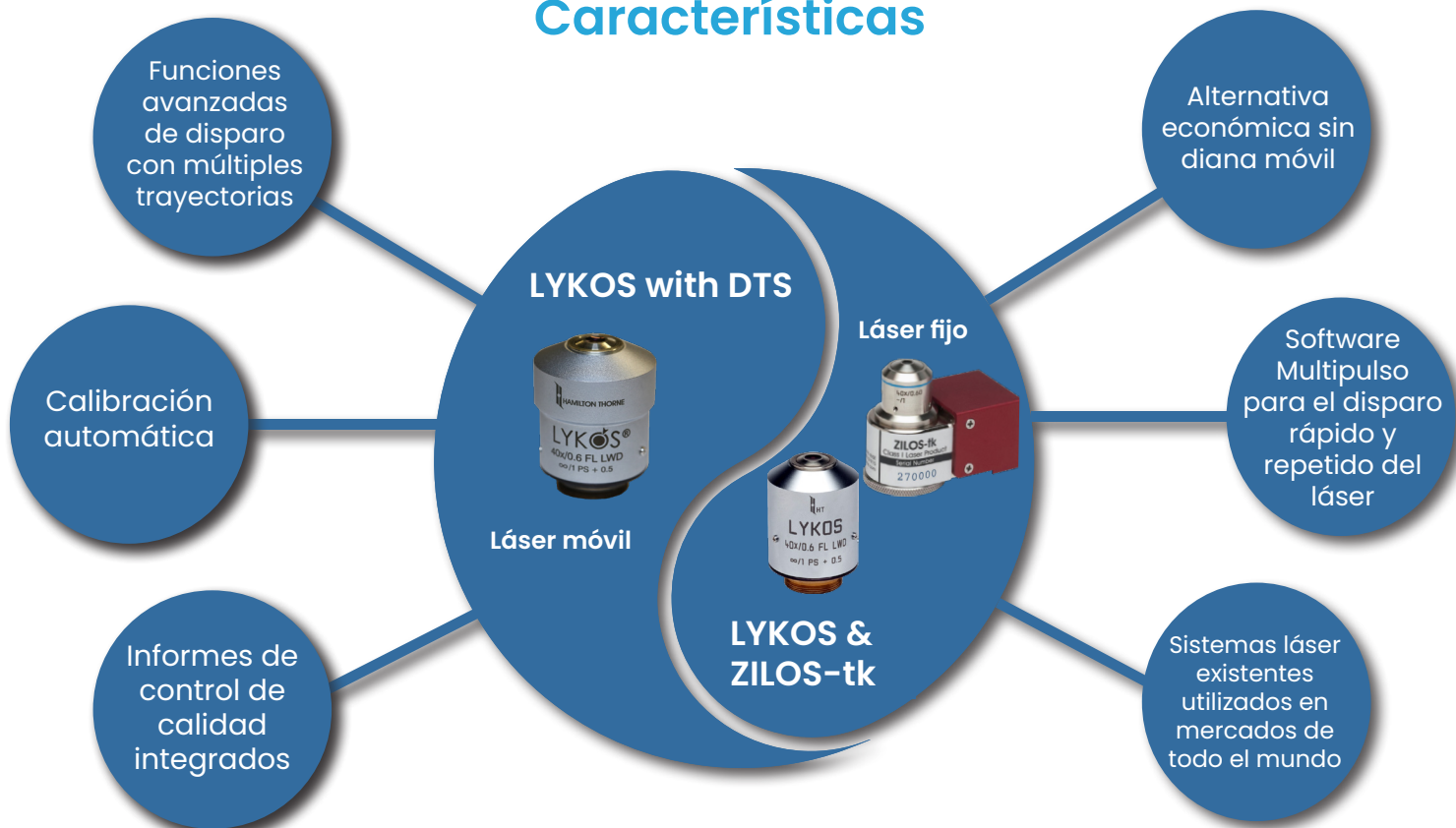

Características principales

- Disponible como sistema láser fijo o móvil.
- Dispare el láser con el ratón o el mando a distancia.
- No requiere realineación láser.
- Instalación rápida y configuración sencilla.

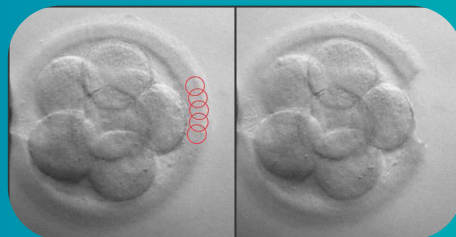

Especificaciones técnicas

- 1460 nm, Diodo infrarrojo en estado sólido.
- Potencia máxima en foco = 300 mW (Clase I).
- Duración de pulso : 1 - 3000 μ segs.
- Objetivo 40x.

**¡Contacte con nuestro equipo
para transformar su laboratorio
hoy mismo!**

Hamilton Thorne Inc.
100 Cummings Center Suite 465E Josep Tarradellas, 8 1º 6ª,
Beverly, MA, 01915, USA Barcelona 08029, Spain
www.hamiltonthorne.com

